

Produkt-Datenblatt

gymna[®]

Combi 400 ViP

Therapiegerät mit Sauggerät, Fullcolour TFT-Touchscreen mit 3D Darstellung, GTS (Elektro-Ultraschall und Option Lasertherapie) und Mobile 400.

Das Combi 400ViP hilft Ihnen, die 3 therapeutischen Ziele der Elektrotherapie zu erreichen: Schmerzlinderung, Gewebeheilung und Muskelstimulation. Dafür stehen Ihnen Ströme, Ultraschall oder Lasertherapie zur Verfügung. Geliefert mit einem Mobile 400 und einschließlich einer modularen Vakuumeinheit für die Anwendung der Elektrotherapie mit Vakuumelektroden. Jetzt auch Kombinationstherapie in Kombination mit Vaco. Der Touchscreen, für intuitive Navigation, führt Sie zu optimalen Behandlungsprotokollen und bietet Zugang zu erweiterten klinischen Informationen mit dem GTS.



Artikelnummer: 360 418 Combi 400ViP Weiß
360 618 Combi 400ViP Schwarz

Charakteristik

■ Therapien:

- Elektrotherapie, 2- und 4- polig, 2 unabhängige Kanäle
- I-t Kurve Diagnostik-Programme
- Ultraschalltherapie
- Simultantherapie (gleichzeitige Behandlung von zwei verschiedenen Indikationen anhand von Elektro/Ultraschall)
- Kombinationstherapie (Behandlung einer Verletzung mit einer Kombination von Elektro- und Ultraschall)
- Lasertherapie.

■ Ströme: 31

- Stromformen: siehe nächste Seiten
- Stromformen mit Kombinationstherapie : 18

■ Ultraschall:

- Multi-Schallkopf (1 und 3 MHz), 4 cm²
- Kontinuierlicher und pulsierender Modus (10–20–30–40–50–100%)
- Visuelle und akustische Kontaktsteuerung
- 2 Ultraschall-Ausgangsanschlüsse

■ Laser: (optionale Probe)

- Gepulst, infrarot Galliumarsenid, 905 nm
- 2 Proben:
 - Probe Mono, mono 400
 - Spitzenleistung: 13,5 W
 - Pulsfrequenz: 2 – 30.000 Hz
 - Durchschnittliche: 70.5 mW
 - Probe Quad, quad 400 (4 diodes)
 - Spitzenleistung: 4 x 18 W
 - Pulsfrequenz: 2 – 5.000 Hz
 - Durchschnittliche: 4 x 12.6 mW

■ Vakuumgerät mit 2 unabhängigen Kanälen:

- 2- oder 4- polig
- Elektronische Vakuumsteuerung
- Kontinuierlicher oder pulsierenden Modus
- Integrierte Massagefunktion

■ Funktionalitäten:

- Behandlungsziel: 190
- Indikationen: 279
- Diagnostik: 12
- Körperteil: 234
- Zelluläre Effekte: 16
- Standard-Therapie-Programme: 71
- Freispeichermenü: 850
- Anatomie Bibliothek: 91

Technische Daten

Sprachen : 13
Netzspannung : 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%
Maximale Leistung, in Betrieb : 100 VA
Geräte (B x H x T) : 360 x 330 x 285 mm
Gewicht incl. Zubehör : c.a 10,8 kg
Mobile 400 (B x H x T) : 500 x 1100 x 600 mm
Gewicht Mobile : c.a 36 kg
Sicherheitsklasse : Class II
Isolierung : Type BF
MDD Klassifizierung : IIa
Richtlinien : Konformität mit den Richtlinien
MDD 93/42/EWG

Standard-Zubehör

100 689	Netzkabel gerade - EU Stecker
340 406	Patient-Elektrodenkabel 2-pol mini/2mm (2)
330 803	Testkabel W/W 2 mm
340 468	Gummi Elektrode 6x8 cm, 2 mm – (4)
100 658	Chamex Tasche - 6x8 cm - (4)
108 935	Klettband elastisch 5x60 cm (4)
115 684	VAS (Schmerzskala)
360 114	Schallkopf 4cm ² 1&3MHz US404 Schwarz
341 088	Contact, 500 ml
340 505	Touch Pen
340 615	Vakuumschlauch dunkelgrau – (2)
340 604	Vakuumschlauch hellgrau – (2)
340 626	Vakuumelektrode - Ø 60 mm, (2) (2x)
340 648	Vakuumschwamm - Ø 60 mm, (4)
318 164	ET Cable 5p Vaco/Electro 400/Guidance
318 167	Com/Pow Cable 6p Vaco/ Electro 400/Guidance
319 025	Intensitätsregler Silber (2)
360 808	Gymna Mobile 400 Gerätewagen
360 819	Vaco Kabelsatz für Mobile 400
360 830	Vakuumelektrodenhalterung Mobile 400

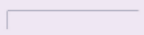
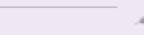
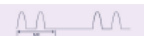
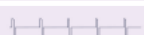
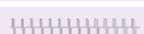
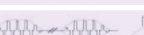
Anleitung

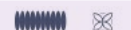
323 011	Sicherheitsaspekte Gymna
362 505	Schnellstart-Anleitung
362 516	Bedienungsanleitungen-CD Gymna Serien

Optionales Zubehör

360 111	Schallkopf 1cm ² 1&3MHz US401 Schwarz
114 142	Probeelektrode stim. Ø 15 mm + Schwamm
109 944	Rundschwamm Probe elektr. stim. (10)
329 978	Novatys Gold Vaginalsonde
330 594	V2B+ Vaginalsonde
330 572	Optima 3 Vaginalsonde
330 583	Perisize 4+ Vaginalsonde
329 989	Analia Analsonde
330 561	Analys+ Analsonde
112 166	Stimulationselektrode, rektal
326 799	Klebeelektrode Ø 3 cm (4)
326 810	Klebeelektrode 2,5x5 cm (4)
326 821	Klebeelektrode 5x5 cm (4)
326 832	Klebeelektrode 5x10 cm (4)
340 446	Gummi-Elektrode 4x6 cm, 2 mm (4)
340 481	Gummi-Elektrode 8x12 cm, 2 mm (4)
108 934	Klettband elastisch 5x30 cm
108 936	Klettband elastisch 5x120 cm
100 657	Chamex Tasche - 4x6 cm (4)
100 659	Chamex Tasche - 8x12 cm (4)
341 099	Contact 5L
341 121	Pumpe, 5L
360 101	Laserprobe mono 400 (incl. holder)
360 104	Laserprobe quad 400 (incl. holder)
339 592	Laser-Schutzbrille EP8-6
340 417	Laser-Abschaltautomatik zu Combi 400
340 428	Adapterkabel 2mm (F) → 4 mm (M)
340 637	Vakuumelektrode - Ø 90 mm, (2)
114 687	Rundschwamm vaco - Ø 90 mm (4)

	COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Therapien					
Elektrotherapie (2 unabhängige Kanäle)	■	■	■	■	■
Ultraschalltherapie (1 & 3 MHz)	■	■	■	■	■
Lasertherapie (optional)	■	■	■	■	■
Kombinationstherapie	■	■	■	■	■
Simultantherapie	■	■	■	■	■
Vakuum	■	■	■	■	■
Benutzeroberfläche					
Vollfarbiges TFT-Display, 10,4 Zoll (SVGA: 800 x 600 Pixel)	■	■	■	■	■
Touch screen	■	■	■	■	■
personalisierte Einstellungen	■	■	■	■	■
Farbgeleitete Therapie	■	■	■	■	■
Parameteransicht im Vollbildschirm	■	■	■	■	■
2 getrennte Intensitätsregler	■	■	■	■	■
Guided Therapy System (GTS)	■	■	■	■	■
Medical E-book: Anatomie Bibliothek	■	■	■	■	■
Hilfe und klinische Information	■	■	■	■	■
Direktzugang zu Elektrotherapie	■	■	■	■	■
Protokolle über: Behandlungsziel, Indikationen, Körperteil	■	■	■	■	■
Protocols: cellular effects [heal the tissue]	■	■	■	■	■
3D-Bilder für Elektrodenlage	■	■	■	■	■
Diagnostik (I/t-Kurve, Rheobase, Chronaxie, ...)	■	■	■	■	■
Kontraindikationen Liste	■	■	■	■	■
Speicher (freie Programme)					
500 für Favoriten/eigene Programme	■	■	■	■	■
200 für Diagnostik Ergebnisse	■	■	■	■	■
100 für eigene sequentielle Programme	■	■	■	■	■
50 für geteilte Programme (mehrere Geräte)	■	■	■	■	■

		COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Elektrotherapie 						
Gleichstrom Erlaubt mit: 						
Galvanisation		☐	☐	☐	☐	☐
Rechteckstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
2-5 Strom (Ultrareizstrom) 		☐	☐	☐	☐	☐
Dreieckstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
MF-Rechteckstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Iontophorese – MF-Rechteckstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Iontophorese - Galvanisation 		☐	☐	☐	☐	☐
Diadynamische Ströme						
MF: Monophas 		☐	☐	☐	☐	☐
DF: Diphas 		☐	☐	☐	☐	☐
RS 		☐	☐	☐	☐	☐
CP: Kurze Periode 		☐	☐	☐	☐	☐
LP: Lange Periode 		☐	☐	☐	☐	☐
TENS-Ströme						
TENS (konventionell) 		☐	☐	☐	☐	☐
TENS (niedrige Frequenz) 		☐	☐	☐	☐	☐
Burst TENS 		☐	☐	☐	☐	☐
Hochfrequenz TENS 		☐	☐	☐	☐	☐
Randomfrequenz TENS 		☐	☐	☐	☐	☐
Han Stim (via Analgesie) 		☐	☐	☐	☐	☐
NMES-Ströme						
Rechteck-Schwellstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Dreieck-Schwellstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Biphasischer Schwellstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Intrapuls-Intervallschwellstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Russische Stimulation 		☐	☐	☐	☐	☐
2-poliger MF-Schwellstrom 		☐	☐	☐	☐	☐
Isoplanares Vektorfeld Schwell 		☐	☐	☐	☐	☐

		COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Interferenzströme						
2-poliger MF-Strom			☐	☐	☐	☐
Isoplanares Vektorfeld			☐	☐	☐	☐
Dipolares Vektorfeld			☐	☐	☐	☐
Klassische Interferenz			☐	☐	☐	☐
Mikrostrom						
Mikrostrom kontinuierlich			☐	☐	☐	☐
Mikrostrom moduliert			☐	☐	☐	☐
Mikrostrom Schwell			☐	☐	☐	☐
Hochvolt						
Hochvolt kontinuierlich			☐	☐	☐	☐
Hochvolt Schwell			☐	☐	☐	☐
Diagnostische Programme						
Rheobase und Chronaxie			☐	☐	☐	☐
Rheobase und AQ			☐	☐	☐	☐
I/t Kurve rechteckig			☐	☐	☐	☐
I/t Kurve dreieckig			☐	☐	☐	☐
I/t Kurve rechteckig + dreieckig			☐	☐	☐	☐
Schmerzpunkte			☐	☐	☐	☐
Diagnostik Ermüdungsfraktur			☐	☐	☐	☐
Iontophorese Programme			☐	☐	☐	☐
Phonophorese Programme			☐	☐	☐	☐
Konstante Spannung/Konstanter Strom			☐	☐	☐	☐
Ultraschalltherapie						
Hybrider Behandlungskopf 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrequent)			☐	☐	☐	☐
Hybrider Behandlungskopf 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrequent)			☐	☐	☐	☐

	COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Lasertherapie 					
Monosonde 400: max. Durchschnittsleistung: 70,5 mW	○		○		
Clustersonde 400: max. Durchschnittsleistung: 4 x 12,6 mW	○		○		
Kombinationstherapie 					
Siehe Ströme mit: 	■		■		
Simultantherapie					
Elektrotherapie (2-polig) + Laser (Optional)	■		■		
Elektrotherapie (2 und 4-polig) + Ultraschall	■		■		
Ultraschall + Laser (Optional)	■		■		
Elektrotherapie (2-polig) + Elektrotherapie (2-polig)	■	■	■	■	
Vakuum 					
2 unabhängige Kanäle	■	■			
Elektronische Vakuumkontrolle	■	■			
Kontinuierlicher Modus / Impulsmodus	■	■			
Integrierte Massagefunktion	■	■			
Verbindbar in Kombination mit Combi 400 oder Duo 400	■	■			
Vacuum Bildschirm dashboard Design	■	■			

■ = Standard
○ = Option